


FISSUROTOMY[®]

CONSERVATIVE PREPARATION & EXPLORATION BURS

— フィッシャーオートミーバー —




小窩裂溝う蝕治療 (C1) の効率向上と、健全歯質を最大限に保存した低侵襲性治療が可能

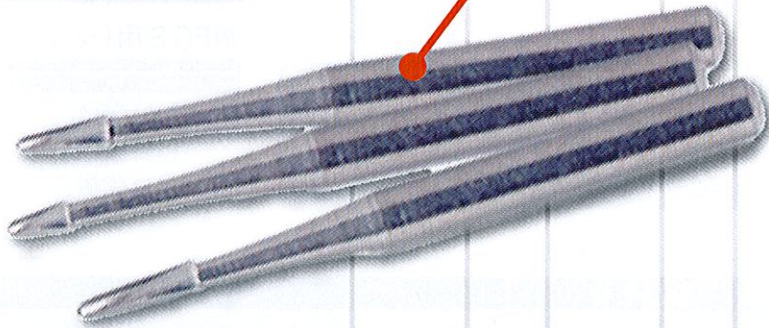

小窩裂溝う蝕治療(C1)の効率向上と、健全歯質を最大限に保存した低侵襲性治療が可能


● 発見が困難な小窩裂溝う蝕(C1)に合わせた特殊先端形状

1/4ラウンドよりも小さい先端サイズと、特殊ロート形状より小窩裂溝う蝕の早期発見と小窩裂溝形態に合わせた低侵襲治療が可能

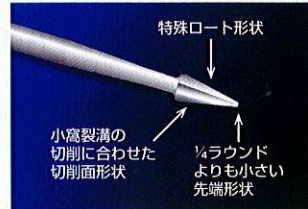


● 初期う蝕における麻酔処置のリスクを軽減

平均的なエナメル質の厚さ(大人:2.5mm/子供:1.5mm)に設定された先端長さにより、初期う蝕における健全エナメル質の削り過ぎ(象牙質露出)を防止した低侵襲治療が可能

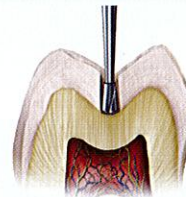


1/4先端形状バー

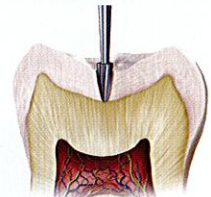


フィッシャーオートミーバー

● 理想的な切削効率により、初期う蝕の治療効率を向上

健全な歯質を最大限に保存した低侵襲形成が可能とな為、治療時間を短くし理想的な窩洞形成が可能

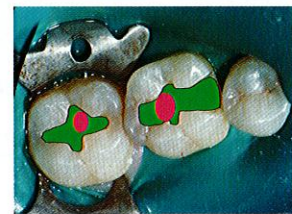


● フィッシャーオートミーバー
● カーバイトバー

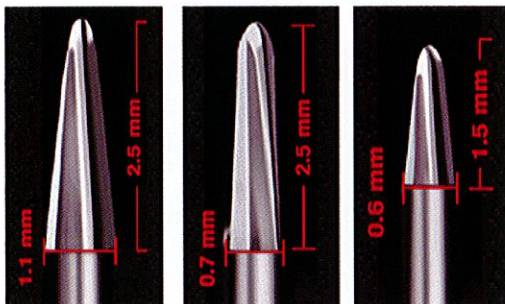

オリジナル

マイクロNTF

マイクロSTF
(小児用)

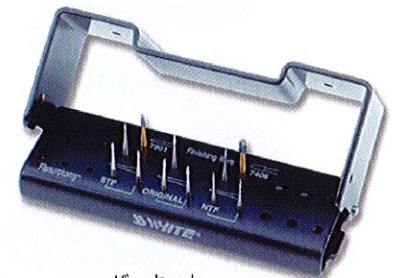

バーキット

【製品ラインナップ】

■FG用(スタンダード)

製品番号	製品名称	包装形態
L01031	FGオリジナル	各10本入
L01032	FGマイクロSTF	
L01033	FGマイクロNTF	

■FGS用(ショートシャンク)

製品番号	製品名称	包装形態
L01034	FGSオリジナル	各10本入
L01035	FGSマイクロSTF	
L01036	FGSマイクロNTF	

■バーキット

製品番号	製品名称	包装形態
L01037	バーキット	FGマイクロSTF×3本 FGマイクロNTF×3本 FGオリジナル×3本 ホワイトフィニッシングバー(7901)×1本 ホワイトフィニッシングバー(7406)×1本

販売名: S.S.ホワイトカーバイトバー 製造販売届出番号: 13B3X00136000001

有限会社 マルヤマ歯科商店

SmartPractice®

株式会社スマートプラクティスジャパン

(製造販売元) 株式会社 新協

(総販売元) 株式会社スマートプラクティスジャパン

本社: 〒227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-9-6

大阪営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-26 新大阪エヒロビル710

九州出張所: 〒801-0826 福岡県北九州市門司区黒川東2-9-2 B101

TEL 045-972-9081 FAX 045-972-0739

TEL 06-6309-4000 FAX 06-6309-4002

TEL 093-341-0526 FAX 093-341-0527